

## 小型薬用冷蔵庫

# HYC-68

# HYC-118



## HYC-68

68 L タイプ

## HYC-118

118 L タイプ

- ※ 停電・高温・低温・ドア開放・センサーエラーなど各種警報機能
- ※ 外から庫内の温度を監視できるリアルタイム温度表示
- ※ 大事な保管物のために高度な温度管理
- ※ 置き場に困らない小型タイプ

## 棚板で仕切られた内部構造

付属の棚板とバスケットで、収納物の保管・管理に便利な内部構造になっています。

## 各種警報機能

停電・高温・低温・ドア開放・センサーエラーなどの各種警報機能を標準搭載しています。内蔵した警報用のバッテリーにより、停電後も8時間アラームを発し続けます。



**HYC-68**

## 薬品保管が可能な温度管理

設定温度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ の範囲で庫内の温度を厳密に管理します。

## 置き場に困らない小型タイプ



HYC-68(495×580×660 mm)、HYC-118(597×635×810 mm)で机の下などの狭いスペースにも設置できます。(100Vでお使いいただけるよう、変圧器を付属するので、その分のスペースが別に必要になります)



**HYC-118**

製品名	HYC-68	HYC-118
設定可能範囲	2~8°C	2~8°C
冷媒	HC冷媒(ノンフロン)	HC冷媒(ノンフロン)
容量	68 L	118 L
外寸 (横幅×奥行×高さ)	495×580×660 mm	597×635×810 mm
内寸 (横幅×奥行×高さ)	415×385×505 mm	515×415×630 mm
重量	38 kg	41 kg
電源	220~240V/50Hz, 115V/60Hz (無料で変圧器を付属)	220~240V 50/60Hz (無料で変圧器を付属)
消費電力	140 W	190 W
付属品	棚板×2枚、バスケット×1個 鍵×2	棚板×3枚、バスケット×1個 鍵×2

## 温度曲線 (HYC-68)

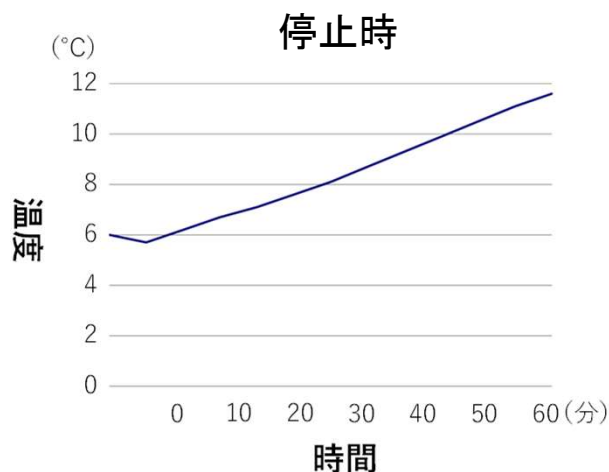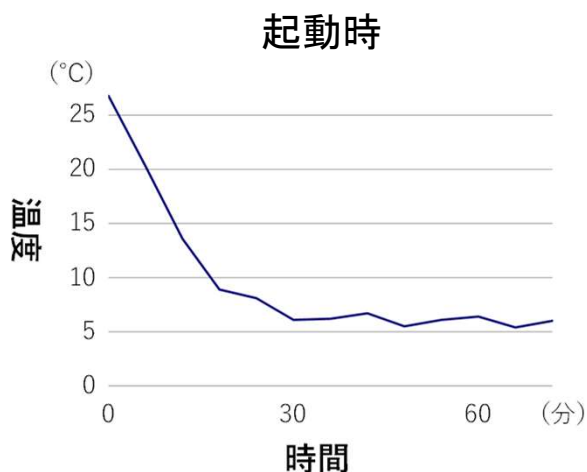

## 新型コロナウイルスワクチン収納数



### HYC-68

**ファイザー製ワクチン : 2340人分**  
 冷却効果等を考慮して2箱収納可能  
 1箱=195バイアル、1バイアル=6人分

**モデルナ製ワクチン : 2000人分**  
 (3回目接種の場合は4000人分)  
 冷却効果等を考慮して20箱保存可能  
 1箱=10バイアル、1バイアル=10人分  
 3回目接種の場合は1バイアル=20人分



### HYC-118

**ファイザー製ワクチン : 7020人分**  
 冷却効果等を考慮して6箱収納可能  
 1箱=195バイアル、1バイアル=6人分

**モデルナ製ワクチン : 4500人分**  
 (3回目接種の場合は9000人分)  
 冷却効果等を考慮して45箱保存可能  
 1箱=10バイアル、1バイアル=10人分  
 3回目接種の場合は1バイアル=20人分

**お問い合わせ:**

株式会社ビットストロング  
<https://www.bitstrong.co.jp/>  
 〒112-0002  
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F  
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616  
 お問い合わせはこちらから [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp) または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>