

ボタンを2回押して作業モードを設定します。
bud:ボディモード **COU:** カウンティングモード **Sur:** サーフェスモード



ボタンを3回押してアラーム温度を設定します
 ボタン2を押してアラーム温度を 37.3℃～39℃に切り替えます




ボタンを4回押して音量を設定します
 ボタンを押すと、音量が U0 から U4 に切り替わります



ボタンを5回押して言語を設定します。



ボタンを6回押して、洗浄液の噴出量を設定します。
 ボタン2を押して、押し出し時間を 0.1～2.0 秒の間に設定できます。

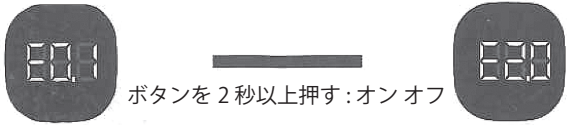


ボタンを2秒以上押す: オン オフ


ボタンを2秒以上押す: オン オフ上記の全ての
 設定が完了したら、画面が表示されるまで
 ボタン1を押し続け、設定が完了し準備が整います。



(1) 壁掛け: 粘着テープをプラ板に貼り付け、プラ板を壁に
 貼り付けます。本体のフックをボードに差し込みます。

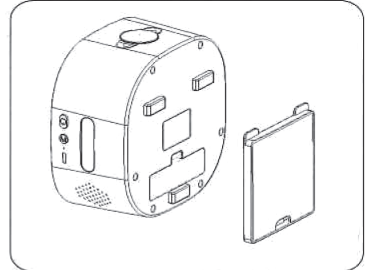

(2) 卓上スタンド: 本体を卓上スタンドに立てて使します。

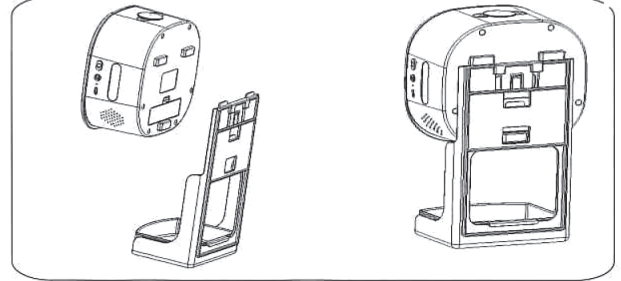

注意事項と警告

1. 体温測定 センサー と近接センサーに洗浄液を注がないでください。
2. 洗浄液を入れた後、直立していることを確認してください。
3. 初めて使用するときは、液体が出るまで5～8回、
 感知エリアの下に手を置いてください。
4. 粘着性の液体を使用しないでください。
 マシン内のチューブが詰まりやすくなります。


スタンドセットの説明

(用意するもの)

専用スタンド(別売)

卓上スタンド(付属)

取付用パーツ(付属)


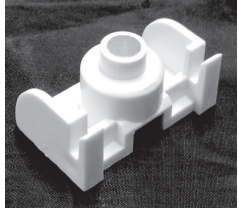


上部側のボールの伸縮を
 調整するつまみを緩め
 右写真の様にボールを
 伸ばします

専用スタンドの設置手順

下にスライドさせると
 下の写真の様に
 広がります

脚を下の写真の様
 に外側に出す様に
 広げます

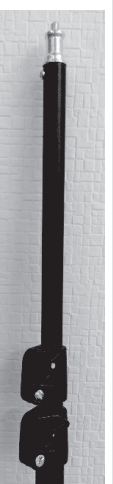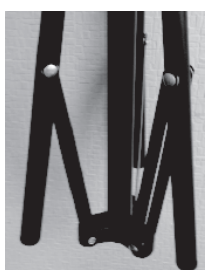

専用スタンドの上部先端のネジ部分に、取付用パーツを取り付けます



卓上スタンド背面に、下の写真の様に取付用パーツを取り付けます



最後に、本体裏面と卓上スタンドを取り付けて完成です

