

# 印象トレー総合カタログ

用途、特性により選択ができる下表の製品をご用意しております。  
 製品の在庫をご確認ください。  
 なお、個々のモデルの実寸については問い合わせをお願いします。

製品	素材/形状	オートクレーブ対応	均厚性	精密印象性	アルジネート・寒天印象材との相性	シリコーン系印象材との相性	変形調整可能	印象材の固定性	使用後の洗浄性	軽量性
ステンレス有歯顎用(大人用)上顎S、L ステンレス有歯顎用(大人用)下顎S、L ステンレス有歯顎用(小児用)上顎S ステンレス有歯顎用(小児用)下顎S、M	ステンレス/有孔	○	○	△	○	△	×	○	△	×
ステンレス無歯顎用(大人用)上顎M、L ステンレス無歯顎用(大人用)下顎S、M、L	ステンレス/有孔	○	○	△	○	△	×	○	△	×
アルミトレー上顎S、M、L、下顎S、M、L、 上顎局部用前歯、右、左、下顎局部用前歯、右、左 セット	アルミ/有孔	○	○	△	○	△	○	○	△	○
アミトレー上顎S、M、L アミトレー下顎S、M、L	ステンレス/メッシュ	○	◎	△	◎	×	○	◎	×	×
フロンティアトレーファイバー(大人用)上顎S、M、L、EL フロンティアトレーファイバー(大人用)下顎S、M、L、EL フロンティアトレーファイバー(小児用)上顎S、M、L フロンティアトレーファイバー(小児用)下顎S、M、L フロンティアトレーファイバー上顎局部用前歯、右、左 フロンティアトレーファイバー下顎局部用前歯、右、左 フロンティアトレーファイバー回転型M、L	PPS樹脂/有孔	○	○	△	○	△	×	○	△	○
ステンレス有歯顎用無孔(大人用)下顎M、EL ステンレス有歯顎用無孔(小児用)上顎S、M、L ステンレス有歯顎用無孔(小児用)下顎S、M、L ステンレス有歯顎用無孔下顎局部用前歯、右	ステンレス/無孔	○	△	○	×	○	×	要接着剤	○	×
ステンレス無歯顎用無孔(大人用)上顎S、M、L ステンレス無歯顎用無孔(大人用)下顎S、M、L	ステンレス/無孔	○	△	○	×	○	×	要接着剤	○	×
シュライネマーカートレー(CDG無歯顎トレー)セット	ステンレス/有孔	○	○	△	○	△	×	○	△	×

## ステンレス有歯顎用(有孔)

●孔により圧力を逃がし、印象材を固定するアルジネート印象材に適した一般的なトレーです。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

各1個入 希望小売価格 **¥1,980** (税別)



## ステンレス無歯顎用(有孔)

●孔により圧力を逃がし、印象材を固定するアルジネート印象材に適した歯茎の印象採取用のトレーです。

※上顎用の実製品は、中央の凹み部分に孔がありません。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

各1個入 希望小売価格 **¥1,980** (税別)



## アルミトレー

- 孔により圧力を逃がし、印象材を固定するアルジネート印象材に適したトレーです。
- 軽量なアルミ素材により保持しやすくなっています。
- 素材が柔らかいため、手やペンチを使って患者に合わせた微調整や、邪魔な箇所を曲げて回避することができます。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

12個入セット 希望小売価格 **¥7,700** (税別)




## アミトレー

- メッシュにより、印象材を安定して固定できます。
  - メッシュにより圧力を逃がし、均肉の印象を採取できます。
  - アルジネート印象材や寒天印象材に適したトレーです。
  - 柔らかいため、手やペンチを使って患者に合わせた微調整ができます。
- ※サンエス石膏のALリムーバーなどの印象材を溶かさずにはがす洗浄剤を使用して簡単に清掃できます。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

各1個入 希望小売価格 **¥1,430** (税別)

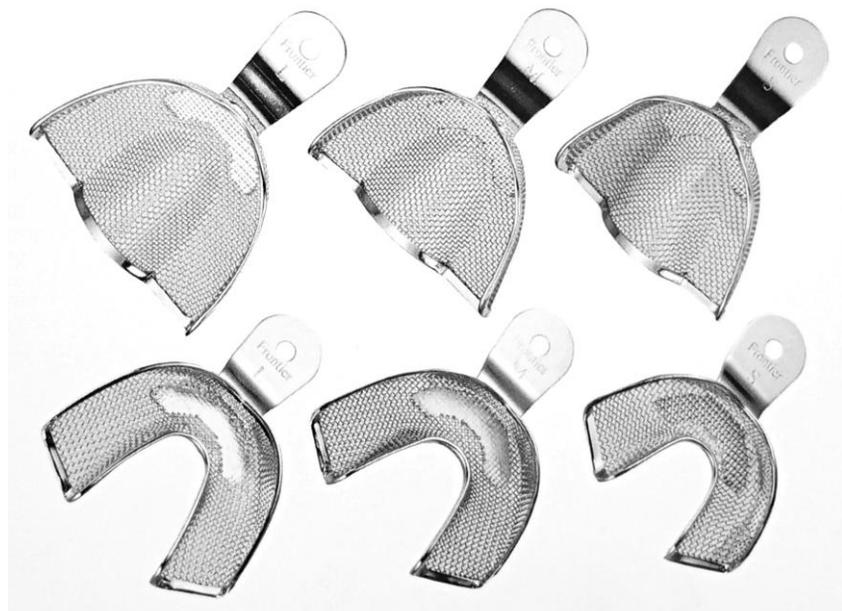

## ファイバートレー

- 孔により圧力を逃がし、印象材を固定するアルジネート印象材に適したトレーです。
- 軽量の樹脂素材により保持しやすくなっています。
- 触れたときの冷たさ、硬さなどの不快感が緩和されます。
- 金属のプレス成型では得られない、エルゴノミックな形状になっています。
- ガラス繊維強化耐熱PPS樹脂製のため、高剛性でオートクレーブ滅菌が可能です。
- 大人用、小児用、特大タイプ、曲部用、回転型の22モデルが揃っています。

各1個入

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

希望小売価格 **¥1,500** (税別)



## ステンレス有歯顎用(無孔)

- 圧力をかけて精密な印象が得られるシリコン系印象材に適した無孔トレーです。
- ※印象材の固定には接着剤などを使用してください。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

各1個入 希望小売価格 **¥1,980** (税別)



## ステンレス無歯顎用(無孔)

- 圧力をかけて精密な印象が得られるシリコン系印象材に適した歯茎の印象採取用のトレーです。
- ※印象材の固定には接着剤などを使用してください。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

各1個入 希望小売価格 **¥1,980** (税別)



## シュライネマーカートレー(CDG無歯顎トレー)

- 総入れ歯作成用の印象採得に使用するトレーです。
- 患者の口腔内のポイントの幅を付属のコンパスで計測し、ガイドの色に合わせて、上顎用5サイズ、下顎用6サイズから最適なサイズのトレーを選択できます。

医療機器製造販売届出番号:13B3X00232001102

トレー/コンパス/カラーガイドセット 希望小売価格 **¥43,780** (税別)



## お問合せ、ご注文での製品の指定方法

- 下表のスラッシュ(選択肢)のある項目を選択して特定してください。
- 例: ステンレス有歯顎用(有孔)下顎L→ステンレス・有孔・下顎・大人用L  
 ステンレス有歯顎用(無孔)左上顎局部用P1→ステンレス・無孔・患者左上L  
 ファイバートレー下顎局部用前歯→樹脂・局所・下顎・前歯

材質	特殊	孔有無	顎上下	サイズ/場所
ステンレス		有孔/無孔	上顎/下顎	大人用S/M/L/EL
ステンレス		有孔/無孔	上顎/下顎	小児用S/M/L
ステンレス	局所	有孔/無孔	上顎/下顎	前歯
ステンレス	局所	有孔/無孔		患者左上(右下)S/患者右上(左下)S/患者左上(右下)L/患者右上(左下)L
ステンレス	回転	有孔/無孔		
ステンレス	無歯	有孔/無孔	上顎/下顎	S/M/L
アミ			上顎/下顎	S/M/L
樹脂			上顎/下顎	大人用S/M/L/EL
樹脂			上顎/下顎	小児用S/M/L
樹脂	局所		上顎/下顎	前歯
樹脂	局所			患者左上(右下)S/患者右上(左下)S/患者左上(右下)L/患者右上(左下)L
樹脂	回転			M/L

### お問い合わせ

販売業者  
 株式会社フロンティアデンタル  
 〒111-0032  
 東京都台東区浅草5-8-3 オザキビル2F  
 TEL:03-6240-6158

製造販売業者  
 株式会社ビットストロング  
 〒112-0002  
 東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F  
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから  
 Mail address: [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp) URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>